

## TeAmo から待望の乱視用ワンデーカラコンが新登場！

### 人気のカラーを乱視用でも♡



やさしく盛れる  
上品ちゅるん瞳

待望の乱視用  
ワンデーカラコン  
新登場!

TeAmo 1DAY  
—TORIC—

CYL -0.75D -1.25D | AXIS 180° IDAY♡ DIA 15.0♡ BC 8.6

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、乱視用ワンデーカラコン 2 色を、11 月 7 日よりコンタクトレンズ TeAmo(ティアモ)公式通販サイトにて発売開始いたします。

### “盛れる 15mm”で人気のカラーを乱視用でも♡

今回乱視用として発売するのは TeAmo1DAY の中でも人気上位にランクインしている「ジェリアブラウン」と「ジェリアベージュ」の 2 色。太めのフチ×ナチュラルな発色で「瞳をきゅるんと見せるデザイン」「ナチュラルなのに爆盛れ！」と好評をいただいているカラーです。

商品スペック：DIA15.0mm/着色直径 14.6mm/BC8.6



ジェリア ブラウン  
Jellia Brown toric

瞳に馴染むちゅるんブラウン



ジェリア ベージュ  
Jellia Beige toric

透明感のある柔らかベージュ

## 製品特長

### 1. 正確で安定したブレない視界 “プリズムバラストデザイン”採用

レンズ上部は薄く整え、レンズ下部に適度な厚みを持たせることでレンズの上下を自然と正しい位置に安定させます。瞬きのたびに正しい位置へレンズが向く仕組みです。

※本製品はガイドマークの記載はありません。



### プリズムバラスト設計

レンズ上部は薄く整え、レンズ下部に適度な厚みを持たせることでレンズの上下を自然と正しい位置に安定させます。瞬きのたびに正しい位置へレンズが向く仕組みです。

※本製品はガイドマークの記載はありません。

### 2. 視界が安定しやすい”フロントトーリックデザイン”採用

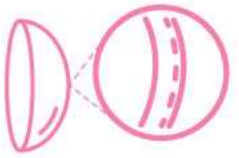
乱視を矯正する度数をレンズの前面部に配置し、安定した視力矯正を実現します。

### フロントトーリックデザイン

乱視を矯正する度数をレンズの  
前面側に配置し  
安定した視力矯正を実現



### 3. UV カット機能、うるおい成分など瞳に優しいレンズスペック

| UVカット                                                                                                                | うるおい成分                                                                            | 高含水                                                                                                   | サンドイッチ製法                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>UV-A 75% 以上<br/>UV-B 95% 以上</p> |  |  <p>高含水<br/>55%</p> |  |
| 紫外線吸収剤を配合し、<br>有害な紫外線から瞳を守る                                                                                          | うるおい感を持続し、<br>瞳に優しい装用感を実現                                                         | 水分が多くうるおい◎<br>柔らかな着け心地                                                                                | レンズ素材で色素を挟み込む<br>安全性の高い構造です                                                         |

### 豊富な組合わせから選べる度数展開！

乱視軸、乱視度数、近視度数を豊富な組合わせで取り扱い、個々の視力や目の形状に最適なレンズを提供します。

※医師の診断に基づいて適切な度数をお選びください。

豊富な組合せ

乱視軸×乱視度数

| 乱視軸 AXIS | 乱視度数 CYL      |
|----------|---------------|
| 180°     | -0.75D -1.25D |

| 度数表   |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ±0.00 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25  |
| -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50  |
| -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50 | -3.75  |
| -4.00 | -4.25 | -4.50 | -4.75 | -5.00  |
| -5.50 | -6.00 | -6.50 | -7.00 | -7.50  |
| -8.00 | -8.50 | -9.00 | -9.50 | -10.00 |

## 乱視用ワンデーカラコンも TeAmo ならお得♡

TeAmo の乱視用ワンデーカラコンは、いつでも通常価格 1 箱 10 枚入りで 1,480 円(税込 1,628 円)とお手軽にご購入いただくことができます。



The graphic features a pink background with a white rectangular area in the center. At the top of the white area, the words "SPECIAL PRICE" are written in large, white, serif capital letters. Below this, the text "通常価格 1箱10枚入り" (Regular Price 1 box 10 pieces) is enclosed in a pink rounded rectangle. To the right of this, the price "¥1,480" is displayed in large, bold, pink characters, with "(税込 ¥1,628)" in smaller black text below it. A circular pink stamp with the text "乱視用" (Astigmatism use) is positioned to the right of the price. On the far right, a black box of TeAmo 1DAY TORIC color contact lenses is shown vertically, with the text "TeAmo 1DAY -TORIC- color contact lens" visible.

### 商品概要

- ブランド名：TeAmo 1DAY TORIC
- 販売名：ティアモワンデー55Ⅱ
- 医療機器承認番号：30600BZX00209A06
- 希望小売価格：1 箱（10 枚入り）¥1,628(税込)
- 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ
- 使用期間：単回使用（再使用禁止）
- 度数(PWR)：±0.00(度なし) / -0.50～-5.00(0.25 ステップ) / -5.50～-10.00(0.50 ステップ)
- 乱視度数(CYL)：-0.75D、-1.25D
- 乱視軸(Axis)：180°
- 商品スペック：DIA15.0mm/BC8.6mm/含水率 55%
- 製造販売元：株式会社 El Dorado
- 販売元：株式会社 Lcode 東京都新宿区四谷 4-28-4 YKB エンサインビル 4 階
- 発売日：2025 年 11 月 7 日(金)
- 販売チャネル：TeAmo 公式通販サイト [https://teacon.jp/type/1day\\_toric/](https://teacon.jp/type/1day_toric/)

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。  
また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

### <本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 Lcode 商品企画 担当：三浦 TEL：03-5312-5967 MAIL：kikaku.pr@lcode.co.jp